


# Kein Kōmadmōd ñan Bōk Jenkwan in Kobbān Jikin eo Ettino ibben Kora

Kōmelele ko ñan an Juon Armij Make Bōk Jenkwan in Kobbān Ānbwin

visby medical™


## BUŊTEN 1 Kōbellok Kein Kōmadmōd eo

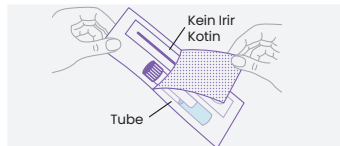

Kwal beim innem jolok aaleb nukruk ko jen katim lallok.

Kōbelloke Kein Kōmadmōd in Bōk Jenkwan in Enbwin eo an Visbly, innem likūt im kōjenolok tube eo.

## BUŊTEN 2 Kōbelloke Kilin Kein Irir Kotin eo

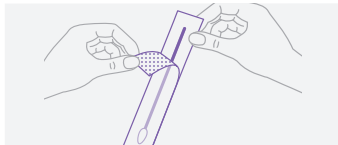

Jolok kilin pakij eo an kein irir kotin eo.

⚠ Jab jibwe bar emeomeo eo an kein irir kotin eo kin adiin beim ak ioon jabdewōt jikin ko. Ñe kwōnāj jibwe ak ñe ejellok bōran kein irir kotin eo, joloke im bar jinoo kin juon kein kōmadmōd kād.

## BUŊTEN 3 Jibwe Kein Irir Kotin eo



Jibwe kein irir kotin eo kin beim ilo am likūt kōtaan addi lab im addi eo iturin.

Kōkmanman am kadeloñ bōran kein irir kotin eo emeoo emaron 2 inij jen an deloñ ilo jikin eo ettino an kora.


## BUŊTEN 4 Bōke Jaambol eo



Kōkmanman am kōroolole kein irir kotin eo iomwin 10-30 jekon, loloorjak an bar eo aŋuri dābin ko ilo jikin eo ettino an kora.


⚠ Kadiwōj kein irir kotin eo **im likūt wōt ilo beim ilo ien am kōmmāne Buŋten 5.**

## BUŊTEN 5 Kōbelloke Tube eo

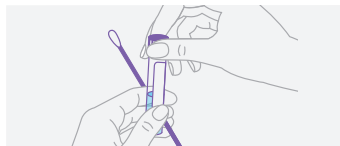

Kōkmanman am timi bōran jikru eo im loloorjak ke bōran kein irir kotin eo ejab aŋur jabdewōt. Lelallok bōran bato eo.

## BUŊTEN 6 Kadeloñ Kein Irir Kotin eo

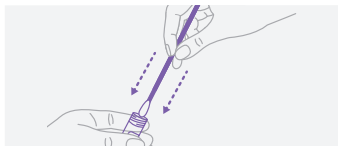


Jibwe mejan tube eo ilo an jab jit waj ñan kwe im kōkmanman am kadeloñ bōran kein irir kotin eo ñan ilooñ tube eo.

## BUŊTEN 7 Jidik Wōt am Jibed Kein Irir Kotin eo



Kōkmanman im jidik wōt am jibed kein irir kotin eo ilo kabin tube eo iomwin 15 jekon. Lale an jab bütük dān. **Kadiwōj kein irir kotin eo jen ilooñ tube eo im kajimwe am jolok.**

## BUŊTEN 8 Karool Tube eo

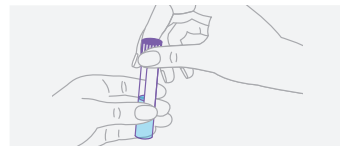

Kabine am jikruiki bōran tube eo.

Kwal beim kin joob im aeboj. Karoollok tube eo ñan taktō eo am.

# Nañinmij ko an Jiron im Likao

## Melele Aurok

Ñan Kójerbal ibben Teej eo an Visby Medical ñan lale Ejmour im Nañinmij ko an Jiron im Likao



Ro rej kójerbale rej aikuj ritti aoleben wáween bók jaambol in mokta jen aer make kómadmód eo ñan bók jenkwan in kobban enbwin eo. Jauj im lale Kόμεlele ko kin wáween Kójerbal Kein Kómadmód in Bók Jenkwan in Enbwin eo an Visby ñan melele ko relablok.



Kein kómadmód in bók jenkwan in kobban enbwin in emaron wór bajjin iloan. Jab idaake dān ko kobban tube eo. Ñe dān ko kobban tube eo renaj būtük ñan iloan mejam, kwal mejam kin aeboj. Ñe dān ko renaj būtük ñan kilim, kwale kin joob im aeboj. Ñe ejab bójrak am abnānō, ba ñan juon taktō.



Kwójab aikuj bók jaambol eo elañe emōj am kójerbal mweiuk kein lajtrak ilo jikin eo ettino ibben kora iloan awa ko 48 remootok: kein karreo ko an kora, joob in kwal jikin ettino eo ibben kora, kein kajir, kein irir ko an jikin eo ettino ibben kora, kein kameomeo ko an jikin eo ettino ibben kora, kein kano bwin jikin eo ettino ibben kora, kein kómedwan ko, ak būtük ko an kora an jikin eo ettino ibben kora.



Ejnbab lablok jen tarrin 2 inj an mwilal am kadelañ kein irir kotin eo ñan iloan jikin eo ettino ibben kora.



ÑE KWÓBÓRORO, jauj im ba ñan taktō eo am.

Mokta jen am bók jenkwan in kobban enbwin jen jikin eo ettino ibben kora kin kein irir kotin, ba ñan taktō eo elañe ewór melele kein ibbam:

- metak bajjin ilo raan ko rej kab jemlok
- metak ilo ñen an ruo armij bed ibben doon
- ejab ekkā an diwójok dān ak nana bwin jen jikin eo ettino ibben kora.

Kakólkól kein remaron walok jen nañinmij ko ilo bajjin jiron (pelvic inflammatory disease, PID). Kajju kakólkól im kómadmóde PID kin wūno emaron jibañ bóbrae jen waróñe im ien ko ewór jorrāan ilo bótoro im rej walok jen PID.



Visby Medical, Inc.  
3010 North First Street  
San Jose, CA 95134



Ñan melele ko relablok, lale Kόμεlele ko ñan wáween Kójerbal Kein Kómadmód in Bók Jenkwan in Enbwin eo an Visby Medical ñan lale Ejmour im Nañinmij ko an Jiron im Likao (<https://www.visby.com/vaginal-collection-ifu/>). Kwómaron kajjiótóke juon kabe in jeje ko jen jikin jibañ Customer eo an Visby Medical ilo 1-833-468-4729 (1-833-GoVisby) ak [support@visby.com](mailto:support@visby.com).