



### PASSO 1 Abrir o kit

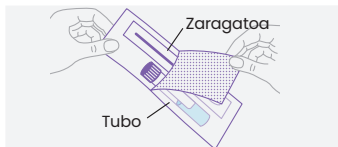

Lave as mãos e dispa-se da cintura para baixo.

Abra o kit de colheita de amostra vaginal Visby e reserve o tubo.

### PASSO 2 Retirar a zaragatoa

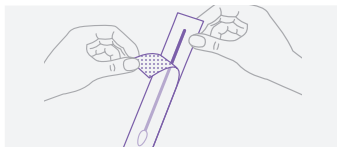

Retire a zaragatoa da embalagem.

⚠ Não toque na extremidade macia da zaragatoa com os dedos ou outros objetos. Se o fizer, ou se a zaragatoa não tiver esta extremidade macia, elimine-a e recomece o teste com um novo kit.

### PASSO 3 Segurar a zaragatoa



Segure a zaragatoa colocando-a entre o seu polegar e o seu dedo indicador.

Insira cuidadosamente a extremidade macia da zaragatoa cerca de 5 centímetros na abertura da vagina.


### PASSO 4 Colher a amostra



Rode suavemente a zaragatoa durante 10-30 segundos, certificando-se de que a zaragatoa toca nas paredes da vagina.


⚠ Retire a zaragatoa e **segure-a na sua mão durante o Passo 5.**

### PASSO 5 Abrir o tubo

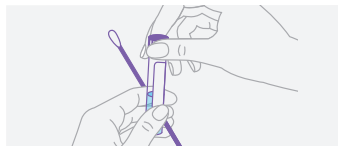

Desaperte cuidadosamente a tampa, certificando-se de que a extremidade macia da zaragatoa não toca em qualquer superfície. Pouse a tampa.

### PASSO 6 Inserir a zaragatoa

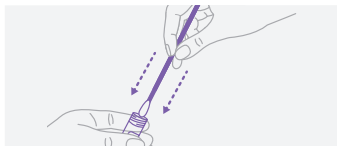


Segure a abertura do tubo afastada de si e insira cuidadosamente a extremidade macia da zaragatoa no tubo.

### PASSO 7 Agitar a zaragatoa



Agite suavemente a zaragatoa contra o fundo do tubo durante 15 segundos. Evite salpicos. **Retire a zaragatoa do tubo e elimine-a adequadamente.**

### PASSO 8 Devolver o tubo

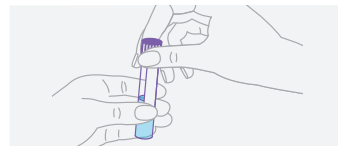







Coloque a tampa no tubo e aperte-a firmemente.

Lave as mãos com água e sabão. Entregue o tubo ao seu prestador de cuidados de saúde.

## Informações importantes

Para utilização com o teste Visby Medical Sexual Health

-  As utilizadoras devem ler o procedimento de colheita na íntegra antes de realizar a autocolheita da amostra. Consulte as instruções de utilização do kit de colheita de amostra vaginal para obter mais informações.
  -  Este kit de colheita de amostra pode conter agentes irritantes. Não ingira o conteúdo do tubo. Se o conteúdo do tubo entrar em contacto com os olhos, lave-os com água em abundância. Se o conteúdo entrar em contacto com a pele, lave a zona com água e sabão. Se a irritação persistir, entre em contacto com um prestador de cuidados de saúde.
  -  Não realize a colheita da amostra se tiver utilizado os seguintes produtos nas últimas 48 horas: produtos de limpeza íntima, sabonetes, lubrificantes, toalhetes vaginais, hidratantes vaginais, antitranspirantes, desodorizantes ou sprays de higiene feminina na zona genital.
  -  Não insira a zaragatoa mais de aproximadamente 5 centímetros na vagina.
  -  SE ESTIVER GRÁVIDA, informe o seu prestador de cuidados de saúde.
  -  Antes de realizar a colheita de uma amostra de zaragatoa vaginal, informe o seu prestador de cuidados de saúde se tiver:
    - dor pélvica recente
    - dor durante as relações sexuais
    - corrimento vaginal involuntar ou mau odor
- Estes sintomas podem dever-se a doença inflamatória pélvica (DIP). O diagnóstico e o tratamento precoces da DIP podem ajudar a prevenir infertilidade e gravidez ectópica associadas à DIP.



Visby Medical, Inc.  
3010 North First Street  
San Jose, CA 95134



Rx Only



Para obter mais informações, consulte as instruções de utilização do kit de colheita de amostra vaginal Visby Medical Sexual Health (<https://www.visby.com/vaginal-collection-ifu/>). É possível solicitar uma cópia impressa ao serviço de assistência ao cliente da Visby Medical através do número **1-833-468-4729 (1-833-GoVisby)** ou do e-mail [support@visby.com](mailto:support@visby.com).